

Catálogo de Productos **FISSO**



NUESTRO PORTOFIO PARA 2024

1. Brazos articulados como soporte fijo de endoscopios
2. Brazos articulados como soporte fijo de instrumentos
3. Brazo articulado multifunción de anclaje rápido Accesorios de soporte para brazo de anclaje rápido
4. Clamps para mesa quirúrgica y brazos articulados



LISTADO DE ARTÍCULOS

BRAZO ARTICULADO COMO SOPORTE FIJO (Una única referencia)

POS. REFERENCIA DESCRIPCIÓN

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | FS 3840.30 | SOPORTE P/ ENDOSCOPIOS DE 5-10MM, RECTO, ESTERILIZABLE, Ø16MM, L 40CM |
| 2 | FS 3840.31 | SOPORTE P/ ENDOSCOPIOS DE 5-10MM, EN "L", ESTERILIZABLE, Ø16MM, L 40CM |
| 3 | FS 3840.40 | SOPORTE P/ INSTRUMENTOS DE 4-18MM, RECTO, ESTERILIZABLE, Ø16MM, L 40CM |
| 4 | FS 3840.41 | SOPORTE P/ INSTRUMENTOS DE 4-18MM, EN "L", ESTERILIZABLE, Ø16MM, L 40CM |
| 5 | FS 3840.42 | SOPORTE P/ INSTRUMENTOS DE 4-18MM, EN "U", ESTERILIZABLE, Ø16MM, L 40CM |

BRAZO ARTICULADO COMO SOPORTE DE ANCLAJE RÁPIDO –QRS- (Una referencia para el brazo y las que se necesiten para los soportes)

POS. REFERENCIA DESCRIPCIÓN

- | | | |
|---|-------------------|--|
| 6 | FS 3840.95 | SOPORTE MULTIFUNCIÓN DE ANCLAJE RÁPIDO (QRS), RECTO, ESTERILIZABLE, Ø16MM, L 40CM |
| 7 | FS 3840.96 | SOPORTE MULTIFUNCIÓN DE ANCLAJE RÁPIDO (QRS), EN "L", ESTERILIZABLE, Ø16MM, L 40CM |
| 8 | FS 5.721 | ACCESORIO EN PEEK DE ANCLAJE RÁPIDO PARA ENDOSCOPIOS DE 5-10 MM, ESTERILIZABLE |
| 9 | FS 5.731 | ACCESORIO DE ANCLAJE RÁPIDO P/ INSTRUMENTOS DE 4-18 MM, ESTERILIZABLE |

CLAMP PARA MESA QUIRÚRGICA (Válido para cualquier soporte de Ø inferior a 16 mm)

POS. REFERENCIA DESCRIPCIÓN

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 10 | FS 5.752VE | CLAMP DE ACERO INOX. CON MOVIMIENTO RADIAL DE FIJACIÓN A MESA QUIRÚRGICA, RAIL, 9-10MM DE PROFUNDO Y 25-32MM DE ALTO, P/ BRAZOS ARTICULADOS Y SOPORTES, Ø16 MM |
|----|-------------------|--|

POSICIÓN 1

SOPORTE PARA ENDOSCOPIOS DE 5-10 MM, RECTO, ESTERILIZABLE, Ø 16MM, L 40 CM

Ref.: FS 3840.30

EAN: 07640152572630

- BRAZO DE ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE DE PEEK DE GRADO MÉDICO
- RECTO, CON ALTURA DE 40 CM HASTA LA PRIMERA ARTICULACIÓN
- SOPORTE PARA ENDOSCOPIOS DE PEEK ANTIDAÑOS Y DIÁMETRO Ø VARIABLE DE 5 A 10 MM DE GROSOR
- MANEJO DESDE LA RUEDA CENTRAL DE TODAS LAS ARTICULACIONES
- DIÁMETRO Ø DE LAS BARRAS DE 16 MM
- ESTERILIZABLE AL VAPOR
- NO NECESITA MANTENIMIENTO *

*Nota: Siempre y cuando se sigan las instrucciones del fabricante para la limpieza desinfección, esterilización y uso del artículo





FISO
Swiss Made

POSICIÓN 2

SOPORTE PARA ENDOSCOPIOS DE 5-10 MM, EN "L", ESTERILIZABLE, Ø 16MM, L 40 CM

Ref.: FS 3840.31

EAN: 07640152572647

- BRAZO DE ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE DE PEEK DE GRADO MÉDICO
- EN "L", CON ALTURA DE 40 CM HASTA LA PRIMERA ARTICULACIÓN
- SOPORTE PARA ENDOSCOPIOS DE PEEK ANTIDAÑOS Y DIÁMETRO VARIABLE DE 5 A 10 MM DE GROSOR
- MANEJO DESDE LA RUEDA CENTRAL DE TODAS LAS ARTICULACIONES
- DIÁMETRO Ø DE LAS BARRAS DE 16 MM
- ESTERILIZABLE AL VAPOR
- NO NECESITA MANTENIMIENTO *



*Nota: Siempre y cuando se sigan las instrucciones del fabricante para la limpieza desinfección, esterilización y uso del artículo

POSICIÓN 3

SOPORTE PARA INSTRUMENTOS DE 4 A 18 MM, RECTO, ESTERILIZABLE, Ø 16MM, L 40 CM

Ref.: FS 3840.40

EAN: 07640152572685

- BRAZO Y SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE
- RECTO, CON ALTURA DE 40 CM HASTA LA PRIMERA ARTICULACIÓN
- SOPORTE PARA INSTRUMENTOS DE DIÁMETRO Ø VARIABLE DESDE 4 A 18 MM DE GROSOR
- MANEJO DESDE LA RUEDA CENTRAL DE TODAS LAS ARTICULACIONES
- DIÁMETRO Ø DE LAS BARRAS DE 16 MM
- ESTERILIZABLE AL VAPOR
- NO NECESITA MANTENIMIENTO *

*Nota: Siempre y cuando se sigan las instrucciones del fabricante para la limpieza desinfección, esterilización y uso del artículo



POSICIÓN 4

SOPORTE PARA INSTRUMENTOS DE 4 A 18 MM, EN "L", ESTERILIZABLE, Ø 16MM, L 40 CM

Ref.: FS 3840.41

EAN: 07640152572692

- BRAZO Y SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE
- En "L", CON ALTURA DE 40 CM HASTA LA PRIMERA ARTICULACIÓN
- SOPORTE PARA INSTRUMENTOS DE DIÁMETRO Ø VARIABLE DESDE 4 A 18 MM DE GROSOR
- MANEJO DESDE LA RUEDA CENTRAL DE TODAS LAS ARTICULACIONES
- DIÁMETRO Ø DE LAS BARRAS DE 16 MM
- ESTERILIZABLE AL VAPOR
- NO NECESITA MANTENIMIENTO *



*Nota: Siempre y cuando se sigan las instrucciones del fabricante para la limpieza desinfección, esterilización y uso del artículo


POSICIÓN 5

SOPORTE PARA INSTRUMENTOS DE 4 A 18 MM, EN "U", ESTERILIZABLE, Ø 16MM, L 40 CM

Ref.: FS 3840.42

EAN: 07640152572654

- BRAZO Y SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE
- En "U", CON ALTURA DE 40 CM HASTA LA PRIMERA ARTICULACIÓN
- SOPORTE PARA INSTRUMENTOS DE DIÁMETRO Ø VARIABLE DESDE 4 A 18 MM DE GROSOR
- MANEJO DESDE LA RUEDA CENTRAL DE TODAS LAS ARTICULACIONES
- DIÁMETRO Ø DE LAS BARRAS DE 16 MM
- ESTERILIZABLE AL VAPOR
- NO NECESITA MANTENIMIENTO *

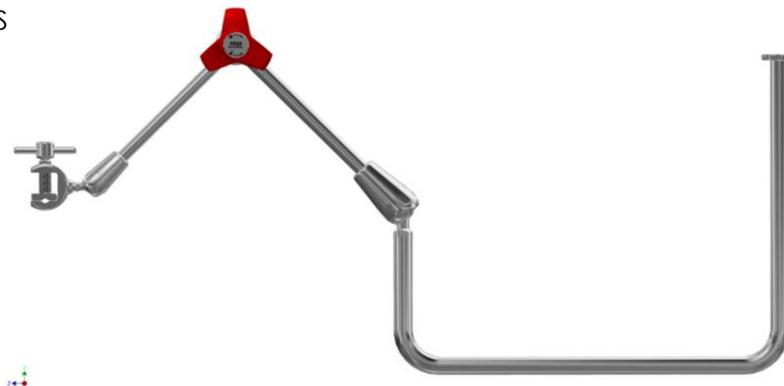

*Nota: Siempre y cuando se sigan las instrucciones del fabricante para la limpieza desinfección, esterilización y uso del artículo

POSICIÓN 6

SOPORTE MULTIFUNCIÓN DE ANCLAJE RÁPIDO -QRS-, RECTO, ESTERILIZABLE, Ø 16MM, L 40 CM

Ref.: FS 3840.95

EAN: 07640152572661

- BRAZO DE ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE DE PEEK DE GRADO MÉDICO
- RECTO, CON ALTURA DE 40 CM HASTA LA PRIMERA ARTICULACIÓN
- CON CONEXIÓN DE ANCLAJE RÁPIDO PARA SOPORTES DE ENDOSCOPIOS O DE INSTRUMENTOS
- MANEJO DESDE LA RUEDA CENTRAL DE TODAS LAS ARTICULACIONES
- DIÁMETRO Ø DE LAS BARRAS DE 16 MM
- ESTERILIZABLE AL VAPOR
- NO NECESITA MANTENIMIENTO *

*Nota: Siempre y cuando se sigan las instrucciones del fabricante para la limpieza desinfección, esterilización y uso del artículo



POSICIÓN 7

SOPORTE MULTIFUNCIÓN DE ANCLAJE RÁPIDO -QRS-, EN "L", ESTERILIZABLE, Ø 16MM, L 40 CM

Ref.: FS 3840.96

EAN: 07640152572678

- BRAZO DE ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE DE PEEK DE GRADO MÉDICO
- EN "L", CON ALTURA DE 40 CM HASTA LA PRIMERA ARTICULACIÓN
- CON CONEXIÓN DE ANCLAJE RÁPIDO PARA SOPORTES DE ENDOSCOPIOS O DE INSTRUMENTOS
- MANEJO DESDE LA RUEDA CENTRAL DE TODAS LAS ARTICULACIONES
- DIÁMETRO Ø DE LAS BARRAS DE 16 MM
- ESTERILIZABLE AL VAPOR
- NO NECESITA MANTENIMIENTO *



*Nota: Siempre y cuando se sigan las instrucciones del fabricante para la limpieza desinfección, esterilización y uso del artículo

POSICIÓN 8

ACCESORIO DE ANCLAJE RÁPIDO -QRS-, EN PEEK, PARA ENDOSCOPIOS DE 5 A 10 MM Ø

Ref.: FS 5.721

EAN: 07640152572210

- ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE Y SOPORTE DE PEEK DE GRADO MÉDICO
- CON MARIPOSA EN ROSCA DE FÁCIL MANEJO
- PARA ENDOSCOPIOS DE 5 Y 10 MM DE DIÁMETRO Ø
- ESTERILIZABLE AL VAPOR
- NO NECESITA MANTENIMIENTO *



*Nota: Siempre y cuando se sigan las instrucciones del fabricante para la limpieza desinfección, esterilización y uso del artículo


POSICIÓN 9

ACCESORIO DE ANCLAJE RÁPIDO -QRS-, EN ACERO, PARA INSTRUMENTO DE 4 A 18 MM Ø

Ref.: FS 5.731

EAN: 07640152572227

- ANCLAJE Y SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE
- CON MARIPOSA EN ROSCA DE FÁCIL MANEJO
- PARA INSTRUMENTOS DE 4 Y 18 MM DE DIÁMETRO Ø
- ESTERILIZABLE AL VAPOR
- NO NECESITA MANTENIMIENTO *

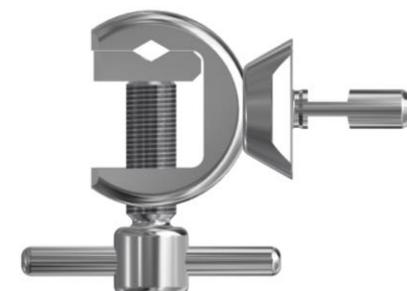

*Nota: Siempre y cuando se sigan las instrucciones del fabricante para la limpieza desinfección, esterilización y uso del artículo

POSICIÓN 10

**CLAMP DE ACERO INOX. CON MOVIMIENTO RADIAL DE FIJACIÓN A MESA QUIRÚRGICA, RAIL,
9-10 MM DE PROFUNDO Y 25-32 MM DE ALTO, PARA BRAZOS ARTICULADOS Y SOPORTES, Ø16 MM**

Ref.: FS 5.752VE


EAN: 07640152572708

- DE ACERO INOXIDABLE
- CON MOVIMIENTO RADIAL PARA MAYOR VERSATILIDAD
- PARA SOPORTES DE HASTA 16 MM DE DIÁMETRO Ø
- PARA RAILES DE MESA QUIRÚRGICA DE 9-10 MM DE PROFUNDIDAD Y DESDE 25 A 32 MM DE ALTURA
- ESTERILIZABLE AL VAPOR
- NO NECESITA MANTENIMIENTO *



*Nota: Siempre y cuando se sigan las instrucciones del fabricante para la limpieza desinfección, esterilización y uso del artículo

INSTRUCCIONES DE USO:

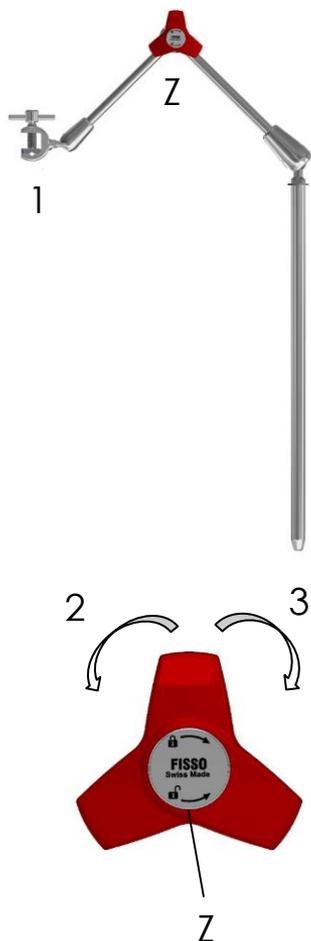

Control y posicionamiento del brazo articulado Fiso:

- 1. Sujete** con una mano la parte distal del soporte (1) y con la otra maneje la rueda central (z).
- Para **aflojar** gire la rueda central (z) en **sentido contrario** a las agujas del reloj (2) tanto como sea necesario.
- Coloque el brazo articulado en la posición necesaria.
- Para **Bloquear**, gire la rueda central (z) en el **sentido** de las **agujas del reloj** (3) tanto como sea necesario.
- Control:** Compruebe que el brazo articulado está en la posición deseada y sujeto con firmeza.

Instrucciones de Mantenimiento:

- ❑ Los brazos articulados han de ser desinfectados y limpiados en modo bloqueado. 
- ❑ No lubricar. No se necesita y puede alterar el funcionamiento del brazo. 
- ❑ No se han de sumergir en líquidos si no están totalmente bloqueados. 
- ❑ Todos los artículos Fiso han de ser esterilizados a vapor.
- ❑ Para esterilizar hay que desbloquear totalmente el brazo articulado. 
- ❑ Con la entrega de cada artículo se proporcionan Instrucciones de uso al máximo detalle.

Problemas más frecuentes que ocurren sin un buen tratamiento

- Corrosión en las articulaciones por limpiar en posición de desbloqueo
- Caídas o impactos fuertes
- Forzado del brazo por intentar moverlo sin destensarlo correctamente
- Intentos de reparación sin conocimiento del artículo

En resumen...

Podemos optar por un brazo con soporte fijo, de endoscopios o instrumentos



Soporte fijo p/ instrumentos



Soporte fijo p/endoscopios

...O por un brazo multifunción al que se le pueden cambiar los soportes en un click....



Pueden ser...



...Y todos van fijados a la mesa quirúrgica con nuestro Clamp radial...



Nota 1.- Aunque nuestro Clamp radial puede servir para anclar otros soportes, siempre que tengan un diámetro inferior a 17 mm

Nota 2.- Y nuestros soportes pueden anclarse con otro clamp, siempre que acoplen los 16 mm de su diámetro



¡Muchas gracias!